


# Unterkiefer Retainer

## Mandible Retainer

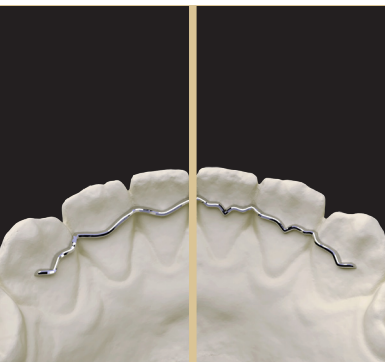

V1 Norm.Form V2

### Norm.Form.3R

- Retainer für die Sicherung des Zahnbogens mit bestmöglichem Tragkomfort.
  - Retainer for securing the dental arch with the best possible wearing comfort.
- Optional: Sandgestrahlte Kleberetentionen für eine optimale Adhäsion.
  - Optional: sandblasted adhesive retention for optimum adhesion.



V1 Thin.Form V2

### Thin.Form.3R

- Optimale Passgenauigkeit und zugängliche Interdentalräume für eine verbesserte Zahnhygiene.
  - Optimal accuracy of fit and accessible interdental spaces for improved dental hygiene.
- Trägt spürbar weniger auf durch kleinst mögliche Dimension.
  - It doesn't disturb the feeling in the mouth thanks the smallest dimension of the retainer.
- Sandstrahlung nicht möglich.
  - Sandblasting not possible.



**Hostettler Dental AG**  
+41 62 962 31 41  
retain@kmzf.ch  
www.hostettler-dent.ch

Friedhofweg 24  
CH - 4950 Huttwil

Wir sind für Sie da  
Montag bis Freitag  
von 8 – 18 Uhr

Himmelblau.ch

We are available for you from  
Monday to Friday from  
8 am to 6 pm

# RETAIN<sup>3</sup>R

Für ein leichtes Kopfgefühl

# RETAIN<sup>3</sup>R

## FORMENKARTE

## FORM CARD

CAD CAM produzierter Retainer

## Höchste Passung bei absoluter Biokompatibilität

CAD CAM manufactured retainer

## Highest fit with absolute biocompatibility



# Oberkiefer Retainer

## Maxillary Retainer



V1 Norm.Form V2

### Norm.Form.3R

- Passt präzise an die palatinalen Zahnflächen für ein natürliches Gefühl im Mund.
  - Fits precisely to the palatal tooth areas for a natural feeling in the mouth.
- Verläuft ausserhalb der Kontaktzonen für den Schutz des Retainers und der Klebestellen vor Kaukräften.
  - Extends outside the contact zones to protect the retainer and the adhesive areas from chewing forces.

- Abgerundete Kanten für ein möglichst angenehmes Tragegefühl.
  - Rounded for the best possible wearing comfort.
- Optional: Sandgestrahlte Kleberetention für optimale Adhäsion.
  - Optional: sandblasted adhesive retention for optimum adhesion.

### Thin.Form.3R

- Verlauf so grazil wie möglich.
  - Course as delicately as possible.
- Trägt spürbar weniger auf durch kleinst mögliche Dimension.
  - It doesn't disturb the feeling in the mouth thanks the smallest dimension of the retainer.
- Sandstrahlung nicht möglich.
  - Sandblasting not possible.



V1 Thin.Form V2

# Spezielle Formen

## Special shapes

Selbstverständlich gehen wir auf Ihre Wünsche ein und entwerfen in Zusammenarbeit mit Ihnen die optimalen Retainer Designs für Ihre Kunden.

*Of course, we respond to your wishes and develop the optimal retainer designs for your customers in cooperation with you.*

Die nachfolgenden Beispiele sind für Ober- und Unterkiefer erhältlich:  
*The following examples are for upper and lower jaws available:*



Strong.Form

### Strong.Form.3R

- Dank grösserer Dimension muss dieser Retainer nur auf zwei bis vier Zähne geklebt werden.
  - Thanks to its larger dimension, this retainer only needs to be bonded to two to four teeth.
- Optional: Sandgestrahlte Kleberetention für eine optimale Adhäsion, ist auch in Peek (Polyetheretherketon) produzierbar.
  - Optional: sandblasted adhesive retention for optimum adhesion can also be produced in Polyether ether ketone.

### Temp.Form.3R

- Das spezielle Design ermöglicht die Versorgung von Nichtanlagen (temporär, ohne Präparation).
  - The special design allows the treatment of tooth gaps (temporarily, without preparation).
- Der Retainer schützt das Behandlungsergebnis bis zur endgültigen Versorgung.
  - The retainer protects the treatment result until the final restoration.
- Zur Sicherung von Parodontose geschädigten Zähnen und gleichzeitigem Lückenschluss der Zahnreihe.
  - To secure periodontosis-damaged teeth and at the same time fill the gap in the row of teeth.

### Pad.Form.3R


- Tiefbiss-Situation bei den Eckzähnen.
  - Deep bite situation in canines teeth.
- Klebepads schützen vor dem Absplittern des Kunststoffes durch Unterkiefergrenzbewegungen.
  - Adhesive pads protect the acrylic from splintering due to movements of the lower jaw.

### Material unserer Retainer:


Ti Gr 5 Eli, Materialdatenblatt auf Anfrage.

### Material of our retainers:

Ti Gr 5 Eli, material data sheet on request.

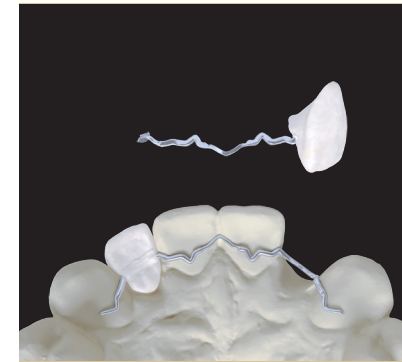

Temp.Form

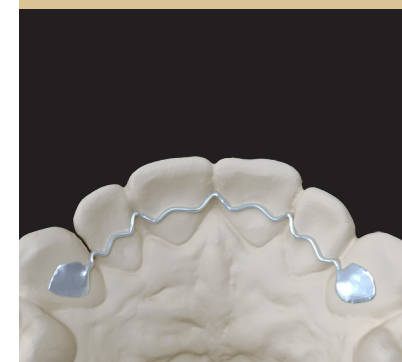

Pad.Form