



HERBST3R[©]

FORMENKARTE *FORM CARD*

CAD CAM produzierte Herbst3R aus CoCr

Höchste Stabilität im schlanken Design

*CAD CAM manufactured Herbst3R
in CoCr*


***Maximal stability
in it's smallest
form***



Unser Swiss-3D-Herbst3R *Our Swiss-3D-Herbst3R*

Die bewährte Kombination von Behandlungserfolg mit dem bestmöglichen Tragekomfort.

The proven combination of treatment success with the best possible wearing comfort.

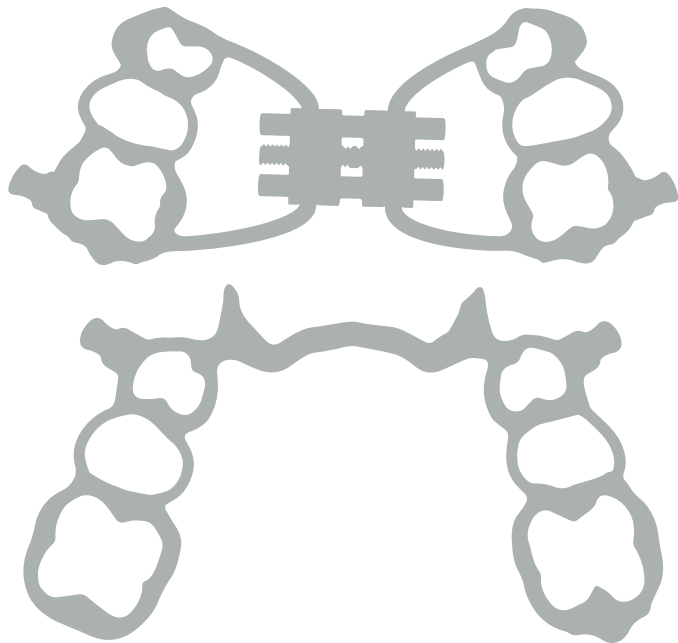

Das Material unserer Herbst3R:

CoCr, Materialdatenblatt auf Anfrage.

The material of our Herbst3R:

CoCr, material data sheet on request.

Seine charakteristischen Eigenschaften:

Its characteristic features:

- Sandgestrahlte Bänder für eine optimale Adhäsion.
- Sandblasted bands for optimal adhesion.
- Bruchfest aufgrund neuer Design- und Fertigungsprozesse (3D-Druck), ohne Schweissungen im Bereich der Teleskoparme.
*- Very resilient due to improved manufacturing process.
No welding around the telescope arms.*
- Individuell anpassbar nach Ihren Wünschen, «auch/wie z.B.» beim Profildurchmesser des Bügels / Bandstärke / Anzahl Bänder / Abhebehilfen und Sollbruchstellen für eine einfache Entfernung, uvm.
- Customizable according to your wishes, «also/such as» for the profile diameter of the bracket.
- Verschiedene Teleskop Typen.
- Different telescope types.
- Bewährte Teleskoparme von Dentaaurum.
- Reliable telescope arms by Dentaaurum.
- Bestmögliche Passgenauigkeit.
- Perfect fit.
- Optimierter Tragekomfort für Patienten gegenüber herkömmlichen Herbstscharnieren.
- Improved carrying comfort compared to conventional Herbst.

Herbst3R Ausführungen

Herbst3R types

Das Herbst3R ist in 2 Standardausführungen erhältlich: **Herbst.3R.DS** und **Herbst.3R.TP**. Beide Typen sind wahlweise mit Teleskopgeschiebe (1-Teilig) oder Teleskoprohr (2-Teilig) verfügbar. Herbst3R kann zudem mit 4er-Brackets ergänzt werden. Über zusätzliche Distanzringe kann der Vorschub individuell erweitert werden. Die nachfolgend aufgeführten OK- und UK-Varianten sind frei kombinierbar und auf Wunsch auch anpassbar (bitte Designänderungen skizzieren).

Das **Herbst.3R.DS** hat eine Dehnschraube im Oberkiefer und einen Lingualverbinder im Unterkiefer. Der UK Lingualverbinder ist abstehend um ein Einwachsen zu verhindern.

*The **Herbst.3R.DS** has an expansion screw in the upper jaw and a lingual connector in the lower jaw. The mandibular lingual connector is protruding to prevent ingrowth.*

*The Herbst3R is available in two default types: **Herbst.3R.DS** and **Herbst.3R.TP**. Both types are available with two telescope systems: a single-piece-telescope or a two-piece version. In addition, Herbst3R can be manufactured with brackets on teeth 4 of the upper jaw and it is possible to achieve variable forward push with optional distance-rings. The OK / and UK variants listed below can be freely combined and customized on request (please outline design changes).*

Der **Herbst.3R.TP** hat einen Gaumenbügel im Oberkiefer und einen Lingualverbinder im Unterkiefer, der auf Wunsch anliegend oder abstehend gestaltet werden kann.

***Herbst.3R.TP** has a palatal bow in the upper jaw and a lingual connector in the lower jaw which can be designed according to your needs either tight-fitting or protruding.*

Herbst.OK.3R.DS



OK Herbst mit
Dehnschraube
**OK Herbst with
expansion screw**

Herbst.UK.3R.LC



UK Herbst mit
Lingualverbinder
(Cervikalsaum verlaufend)
**UK Herbst with
lingual connector
(cervical hem running)**

Herbst.OK.3R.TP



OK Herbst mit
Transpalatinalbügel
**OK Herbst with
Transpalatal bracket**

Herbst.UK.3R.LR



UK Herbst mit
Lingualverbinder
(anliegend oder abstehend)
**UK Herbst with lingual
connector
(abutting or protruding)**

Palatinal Palatinal

Herbst-Scharniere / Sets der Firma Dentaurum GmbH
Herbst-hinges / sets of the company Dentaurum GmbH



Herbst TS Set

Teleskop-System. Zum Anschweißen auf Bänder oder gegossene Schienen.

Inhalt:

- 1 x Teleskopgeschiebe, rechts
- 1 x Teleskopgeschiebe, links
- 4 x Innensechskantschraube
- 4 x F-Sockel

Im Lieferumfang ist kein Innensechskantschlüssel enthalten!

Länge	REF	Menge
20 mm	607-126-20	1 Set
22 mm	607-126-22	1 Set
24 mm	607-126-24	1 Set

CE 0483



Herbst I Set

Mit Innensechskantschrauben.

Zum Anschweißen auf Bänder oder gegossene Schienen.

Im Lieferumfang ist kein Innensechskantschlüssel enthalten!

REF 607-120-00	1 Set
----------------	-------

CE 0483

Inhalt:

1 x Teleskoprohr, rechts	REF 607-121-00
1 x Teleskoprohr, links	REF 607-122-00
2 x Teleskopstange	REF 607-124-00
4 x Innensechskantschraube	REF 607-122-30
4 x F-Sockel	REF 607-127-30



Herbst II Set

Mit Innensechskantschrauben.

Für die Fixierung auf Bögen in der Multibrackettechnik.

Im Lieferumfang ist kein Innensechskantschlüssel enthalten!

REF 607-108-00	1 Set
----------------	-------

CE 0483

Inhalt:

1 x Teleskoprohr, rechts	REF 607-121-00
1 x Teleskoprohr, links	REF 607-122-00
2 x Teleskopstange	REF 607-124-00
2 x Innensechskantschraube, kurz	REF 607-108-10
2 x Innensechskantschraube, lang	REF 607-108-20
4 x Mutter	REF 607-111-00

Teleskop-System für Herbst3R Telescope system for Herbst3R

Zubehör
Accessories

Distanzringe

Für Herbst I bis IV.

Länge	für	REF	Menge
1 mm	Herbst I / II / IV	607-103-00	10 Stück
2 mm	Herbst I / II / IV	607-104-00	10 Stück
3 mm	Herbst I / II / IV	607-105-00	10 Stück
4 mm	Herbst I / II / IV	607-107-00	10 Stück
5 mm	Herbst I / II / IV	607-112-00	10 Stück

CE 0483

Distanzringe, geschlitzt

Länge	für	REF	Menge
1 mm	Herbst TS + SUS	607-103-11	10 Stück
2 mm	Herbst TS + SUS	607-104-11	10 Stück
3 mm	Herbst TS + SUS	607-105-11	10 Stück
4 mm	Herbst TS + SUS	607-107-11	10 Stück

CE 0483

Innensechskantschlüssel 1,5

sterilisierbar

Schlüsselweite	für	REF	Menge
1,5 mm	Herbst TS / I / II + SUS	607-144-00	1 Stück

CE

Wir sind für Sie da
Montag bis Freitag
von 8 – 18 Uhr

We are available for you from
Monday to Friday from
8 am to 6 pm



In Zusammenarbeit mit
In cooperation with



Hostettler Dental AG

Friedhofweg 24
CH - 4950 Huttwil
+41 62 962 31 41
retain@kmzf.ch
www.hostettler-dent.ch



Für ein leichtes Kopfgefühl