



SPAC3R[©]

FORMENKARTE *FORM CARD*

CAD CAM produzierte Spac3R für Maxilla und Mandibula

**Höchste Passung
bei absoluter
Biokompatibilität**

*CAD CAM produced Spac3R for
Maxilla and Mandibula*

***Highest fit
with absolute
biocompatibility***



Unser Swiss-3D-Spac3R Our Swiss-3D-Spac3R

Die bewährte Kombination von sicherem Behandlungserfolg mit dem bestmöglichen Tragekomfort.

The proven combination of guaranteed treatment success with the best possible wearing comfort.



Das Material unserer Spac3R:

Ti Gr. 5 Eli, Materialdatenblatt auf Anfrage.

The material of our Spac3R:

Ti Gr 5 Eli, material data sheet on request.

Seine charakteristischen Eigenschaften:

Its characteristic features:

- Sandgestrahlte Bänder für eine optimale Adhäsion.
- Sandblasted bands for optimal adhesion.
- Optional: geätzte Bänder.
- Optional: etched bands.
- Biokompatibilität durch Titan, nickelfrei
- Biocompatibility through titanium, nickel free
- Individuell anpassbar nach ihren Wünschen, «auch/wie z.B.» beim Profildurchmesser des Bügels
- Customizable according to your wishes, «also/such as» for the profile diameter of the bracket
- Verschiedene Typen mit und ohne Auflager
- Different types with and without occlusal stop
- In Farbe erhältlich
- Available in color



Spac3R für den Ober- und den Unterkiefer *Spac3R for the upper and lower jaws*

Der Spac3R ist eine individuelle Lösung, um zu verhindern, dass sich Lücken durch frühzeitigen Zahnverlust verschliessen oder verknapfen. Der Spac3R ist in zwei Typen unterteilt: V1 folgt dem Zahnfleisch und lässt Raum für den zentralen Zahndurchbruch. V2 schafft eine möglichst direkte Überbrückung der Zahnücke für kleinst mögliche Irritation mit genügend Abstand zum Zahnfleisch für den Zahndurchbruch.


The Spac3R is an individual solution to prevent gaps from closing or shortening due to premature tooth loss. The Spac3R is divided into two types: V1 follows the gum and leaves space for the central tooth eruption. V2 creates the most direct bridging of the tooth gap for the smallest possible irritation with sufficient distance to the gum for tooth eruption.

Spac3R V 1

- V1: indirekt / *indirect*



Spac3R indirekt
Spac3R indirect

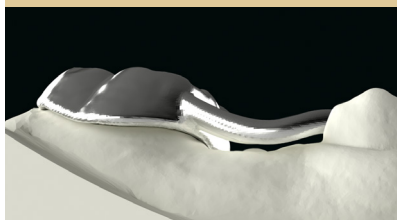

**Zahnfleischoberfläche
folgend**
Following gum surface

Spac3R V 2

- V2: direkt / *direct*




Spac3R direkt
Spac3R direct



Abstand zum Zahnfleisch
Distance to the gum

Sie können Auflager zur okklusalen Abstützung auf den Zähnen frei wählen. Die Kombinationen zwischen V 1, V 2 und den okklusalen Abstützungen sind individuell anpassbar.

You can freely select occlusal stop for support on the teeth. The combinations between V1, V2 and the occlusal supports can be customized.

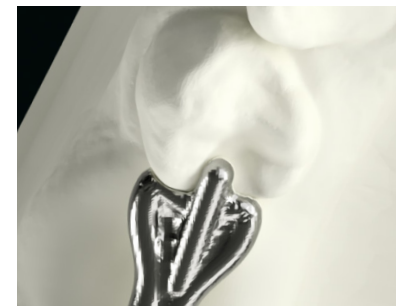

Mit okklusaler Abstützung
With occlusal stop



**Molarband mit
okklusaler Abstützung**
**Molar band with
occlusal stop**



Ohne okklusale Abstützung
Without occlusal stop



**Molarband ohne
okklusale Abstützung**
**Molar band without
occlusal stop**

Spac3R für den Ober- und den Unterkiefer *Spac3R for the upper and lower jaws*

Extraktoren sind seitliche Attachments auf den Bändern, welche ein einfacheres Entfernen des Spac3R ermöglichen.

Extractors are side attachments on the straps that allow easier removal of the Spac3R.



Wir können mit Ihnen zusammen, ihr eigenes individuelles Design entwickeln. Ein Design welches speziell für Sie und Ihren Workflow entwickelt wird. Zwei mögliche Beispiele sehen Sie unten.

We can work with you to develop your own custom design. A design that is developed specifically for you and your workflow. You can see two possible examples below.



**Zwei mögliche Teilbänder
für die Prämolaren**
**Two possible partial strips
for the premolars**



**Mit einzelmem
ligualem Distanzarm**
**With single ligual
spacer arm**



**Mit einzelmem
bukkalem Distanzarm**
**With single buccal
spacer arm**

Wir sind für Sie da
Montag bis Freitag
von 8 – 18 Uhr

We are available for you from
Monday to Friday from
8 am to 6 pm



Hostettler Dental AG

Friedhofweg 24
CH - 4950 Huttwil
+41 62 962 31 41
retain@kmzf.ch
www.hostettler-dent.ch



Für ein leichtes Kopfgefühl